
















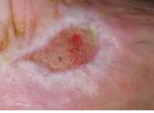



Une gamme adaptée aux soins
de différents types de plaies

Remboursement selon LPP

		Absorbant	Hydrogel	Mèche	Compresse	Chirurgical	Coussinets
Type de plaie							
	Superficielle	OK	OK	-	OK	OK	OK
	Profonde	-	OK	OK	OK	-	OK
	Nécrotique/sèche	-	OK	-	-	-	-
	Fibrineuse		OK	OK	OK	-	OK
			OK	OK	OK	-	OK
			OK	OK	-	-	OK
	Bourgeonnante		-	-	OK	OK	-
			OK	-	OK	-	-
			OK	-	-	-	-
	Epidermisation	OK	-	-	OK	OK	-
	Mycoses	-	-	OK	OK	-	-

Les formes
remboursées

Dénomination	Taille	Code ACL	Code LPP	Qté
Sorbact® Absorbant	10x10 cm	2108664	1319063	10
	10x20 cm	9710051	1301347	10
Sorbact® Hydrogel	7,5x7,5 cm	9710186	1311624	10

Sorbact® pansement
absorbant 10x10 cm



Sorbact® pansement
hydrogel 7,5x7,5 cm



Sorbact® pansement
absorbant 10x20 cm



Mode d'emploi
Sorbact® Hydrogel

1. Uniformiser le gel du sachet avant ouverture.

2. Déposer **Sorbact® hydrogel** sur la plaie.

3. Fermer avec un film de polyuréthane afin de maintenir en milieu humide.

4. Renouveler impérativement le pansement tous les jours jusqu'à détersion complète.
5. Prendre le relais avec la forme de **Sorbact®** adaptée à l'état et à l'évolution de la plaie.

6. Si nécessaire, utiliser une compresse humide (eau ou sérum physiologique).
Ne pas mettre de compresse sèche !

Ne pas associer avec des pommades, des crèmes ou tout corps gras qui peuvent inhiber le mode d'action et donc l'efficacité des pansements **Sorbact®**.

La face verte du pansement Sorbact® doit toujours être au contact direct du lit de la plaie.